

**TRANSFORME
O LIMITADO
EM ILIMITADO!**

Stretto

**RESULTADO ESTÉTICO
INCRÍVEL EM
POUCO ESPAÇO**

IMPLANTE STRETTO




CÓDIGOS

Comprimento	Código
	Ø 3.0 mm
10 mm	34371
11.5 mm	34341
13 mm	34343
15 mm	34345

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento	11.5 13 15 mm
Diâmetro	3.0 mm
Ápice	2.5 mm
Profundidade	2.5 mm
Rosca Interna	1.4 mm
Encaixe	2.5 mm
Ângulo	24°

Rotação	Perfuração: 800-1200 rpm
	Instalação: 20 rpm
Torque para instalação sugerido	até 60 Ncm

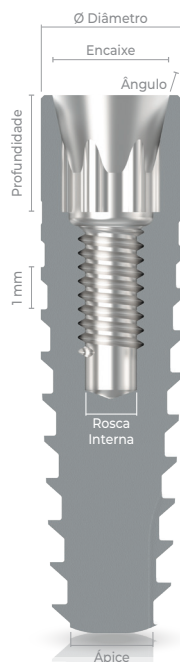

PILARES
DISPONÍVEIS
COM ALTURA
PROTÉTICA DE
3.5 OU 4.8

SISTEMA
CONVENCIONAL
DE PRÓTESE
(ANALÓGICO) OU
SISTEMA DIGITAL
(CAD/CAM)

VERSATILIDADE
PROTÉTICA: PILAR
ANGULADO E HÍBRIDO
(PRÓTESE PARAFUSADA
E CIMENTADA)

INDICADO
PARA CARGA
IMEDIATA OU
TARDIA


ROTAÇÃO
DE
INSTALAÇÃO:
20 RPM

REALMENTE ESTREITO!
O DIÂMETRO DO
PILAR ACOMPANHA
O DIÂMETRO DO
IMPLANTE: 3.0MM

PODE SER
INSTALADO
EM QUALQUER
DENSIDADE
ÓSSEA: OSSO
TIPO I II III IV

INSTALAÇÃO
SIMPLES
E RÁPIDA:
APENAS DUAS
FRESAS

INDICADO PARA ÁREAS
COM POUCO ESPAÇO
MÉSIO-DISTAL: INCISIVOS
INFERIORES E INCISIVOS
LATERAIS SUPERIORES

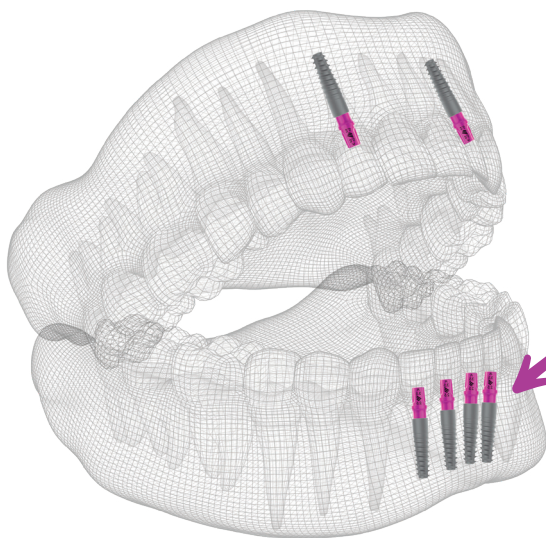

Stretto



Conjunto Stretto – 34595
Estojo Stretto – 34593



Chave Instalação Ø 3.0 CA – 34663



Chave Instalação Ø 3.0 TO – 34656



Torquímetro 20 a 80 Ncm
24407



Fresa Lança 1.7 mm – 34566



Fresa Escalonada 1.7-2.7 mm – 34564




Macho de Rosca Ø 3.0 mm – 34583



Prolongador de Fresas – 19651



Túnel Check Prótese – 34584

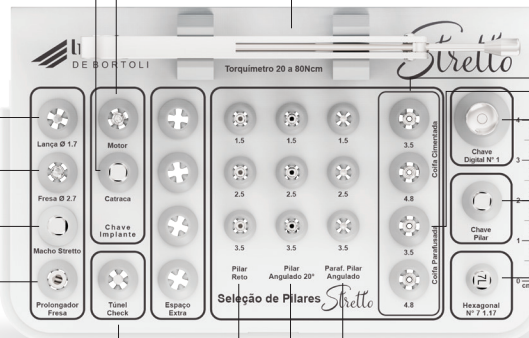

Coifa Cimentada
Stretto 3.0x3.5
(Seleção) – 34577



Coifa Cimentada
Stretto 3.0x4.8
(Seleção) – 34578



Coifa Parafusada
Stretto 3.0x3.5
(Seleção) – 34575



Coifa Parafusada
Stretto 3.0x4.8
(Seleção) – 34576



Chave nº1 Manual
Média – 18623



Chave Pilar Stretto 3.0
33626



Chave Hexagonal nº 7 –
1.17 mm Longa – 20619



Parafuso Pilar
Angulado
1.5, 2.5 e 3.5



Pilar Stretto
3.0x3.5x1.5
(Seleção)
34572



Pilar Stretto
3.0x3.5x2.5
(Seleção)
34573



Pilar Stretto
3.0x3.5x3.5
(Seleção)
34574



Pilar Angulado
Stretto
3.0x3.5x1.5
(Seleção)
34569



Pilar Angulado
Stretto
3.0x3.5x2.5
(Seleção)
34570



Pilar Angulado
Stretto
3.0x3.5x3.5
(Seleção)
34571



Implante
Ø Diâmetro

Tipo
ósseo

Fresa lança
1.7 mm
34566

Fresa Escalonada
1.7-2.7 mm
34564

Macho de Rosca
Ø 3.0 mm
34583

Chave Instalação
Ø 3.0 CA
34663

Chave Instalação
Ø 3.0 TO
34656

Ø 3.0


I
II
III
IV

● Instrumental aplicado conforme diâmetro de implante em situações ósseas corticais de alta densidade.
CA – Contra-ângulo | TO – Torquímetro

PILAR PROVISÓRIO

Cinta	Diâmetro	Código
1.5 mm	Ø 3.5	34351
2.5 mm	Ø 3.5	34353
3.5 mm	Ø 3.5	34355

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

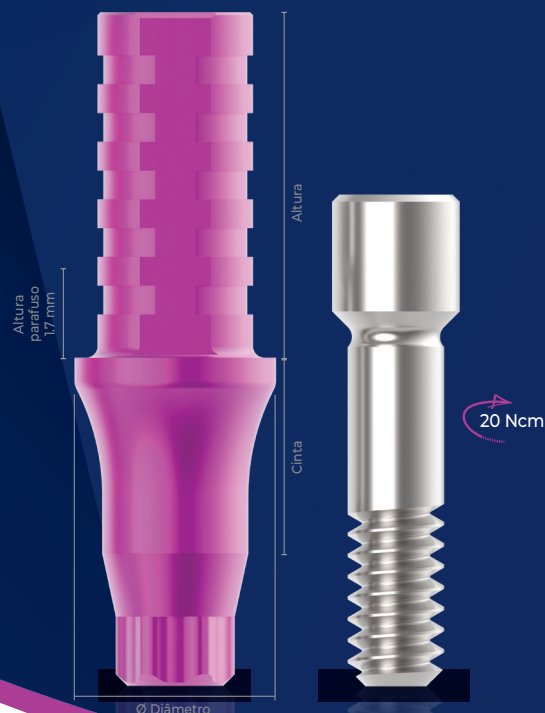

VANTAGENS

- » Indicação para casos unitários em incisivos laterais superior e incisivos inferior;
- » Pilar indexado;
- » Pilar provisório para carga imediata ou tardia;
- » Pode ser utilizado na confecção de cicatrizador personalizado com a utilização de resina composta;
- » Nas reabilitações através do uso dos pilares Base T, podemos utilizar este pilar para a confecção de provisório parafusado durante o período em que a prótese final estiver sendo confeccionada no CAD/CAM;
- » Instalação: Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- » Torque de instalação: 20 Ncm.

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

PROVISÓRIO CLÍNICO



PROVISÓRIO LABORATORIAL




CICATRIZADOR STRETTO

Cinta	Ø 3.0
1.5 mm	33839
2.5 mm	33841
3.5 mm	33055
4.5 mm	33057
5.5 mm	33059

Para implantes de 10 mm a 15 mm.



PILAR BASE T

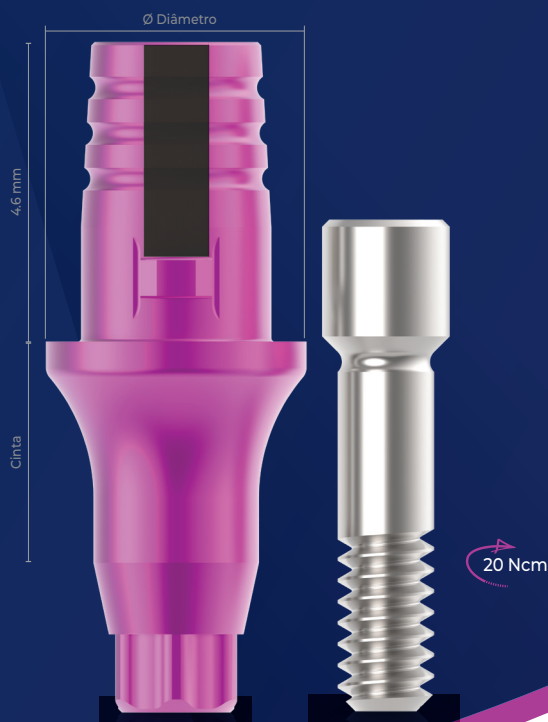

Cinta	Diâmetro	Código
1.5 mm	Ø 3.5	34375
2.5 mm	Ø 3.5	34376
3.5 mm	Ø 3.5	34377

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

VANTAGENS


- » Indicação para casos unitários em incisivos laterais superior e incisivos inferior;
- » Disponível no modelo Base T Small;
- » Os pilares Base T são componentes protéticos utilizados para sistemas CAD/CAM;
- » Permitem a execução de pilares cerâmicos personalizados para uma ampla gama de soluções individualizadas;
- » A linha Base T conta também com o sistema Transfer Digital para implante ou o Transfer Digital Base T para copiar o Base T, que oferece qualidade de superfície superior e uma geometria única para resultados de digitalização de alta precisão;
- » Instalação Base T: Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- » Torque de instalação: 20 Ncm;
- » Para utilização em Exocad® realize o download no site da Implacil De Bortoli.
- » Para utilização em Cerec® seleção do componente no software e seleção do bloco de trabalho, utilize os seguintes códigos 3.5 – Small FX 3.4;

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

ESCANEAMENTO INTRAORAL EXOCAD®



ESCANEAMENTO INTRAORAL CEREC®

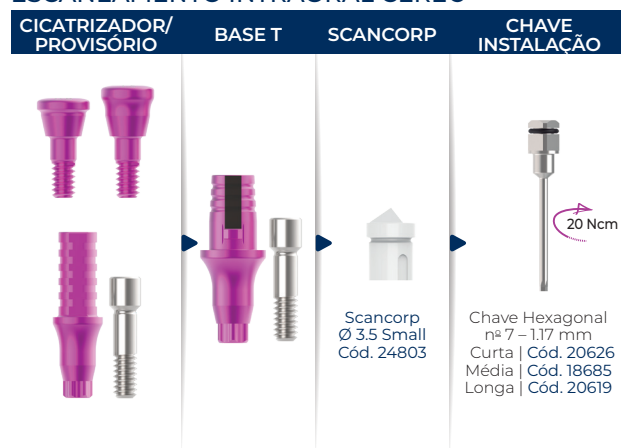

ESCANEAMENTO LABORATORIAL



PILAR RETO STRETTO

Diâmetro x Altura		
Cinta	3.0x3.5	3.0x4.8
1.5 mm	34542	33043
2.5 mm	34543	33045
3.5 mm	34544	33047
4.5 mm	34545	33049
5.5 mm	34546	33051

Para implantes de 10 mm a 15 mm.




VANTAGENS

- » Indicação para casos unitários em incisivos laterais superior e incisivos inferior;
- » Indicado para próteses cimentadas ou parafusadas;
- » Diâmetro: 3.0;
- » Pilar Reto sólido, corpo único (não possui indexação);
- » Reto: cinta de 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 e 5.5 mm;
- » Possui análogos, transferentes de moldagem (plástico), coifas de provisório parafusado (titânio) e fundição (plástica) correspondentes ao diâmetro e altura dos pilares;
- » Para utilização do Pilar Stretto como elemento parafusado, deverá observar a imagem, e conforme parafuso selecionado deverá acrescentar a altura correspondente ao planejamento; esse aumento é referente a utilização do parafuso para fixação da coroa;
- » Para melhor orientação utilize os componentes para seleção, aplique as Coifas de simulação Cimentada ou Parafusada, conforme altura do Pilar aplicado;
- » Coifas Plásticas não acompanham parafusos. Opções Hexagonais e Torx vendidas separadamente;
- » Coifa Titânio acompanha Parafuso Hexagonal 1.17 mm para Provisório Parafusado ou uso como Tampa de Cicatrização;
- » Instalação Pilar: utilizar a Chave Pilar Stretto. Ela poderá ser aplicada em pilares de altura 3.5 ou 4.8;
- » Instalação Coifa Parafusada (titânio ou plástica): chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- » Torque de instalação Pilar: 20 Ncm;
- » Torque de instalação para Coifa quando Prótese Parafusada: 10 Ncm;
- » O Pilar conta com toda a linha digital.




Diâmetro	Altura	Chave Instalação	Transfer Analógico	Transfer Digital Exocad®
Ø 3.0 mm	3.5 mm	33626	34349	34563
	4.8 mm		33040	34397

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

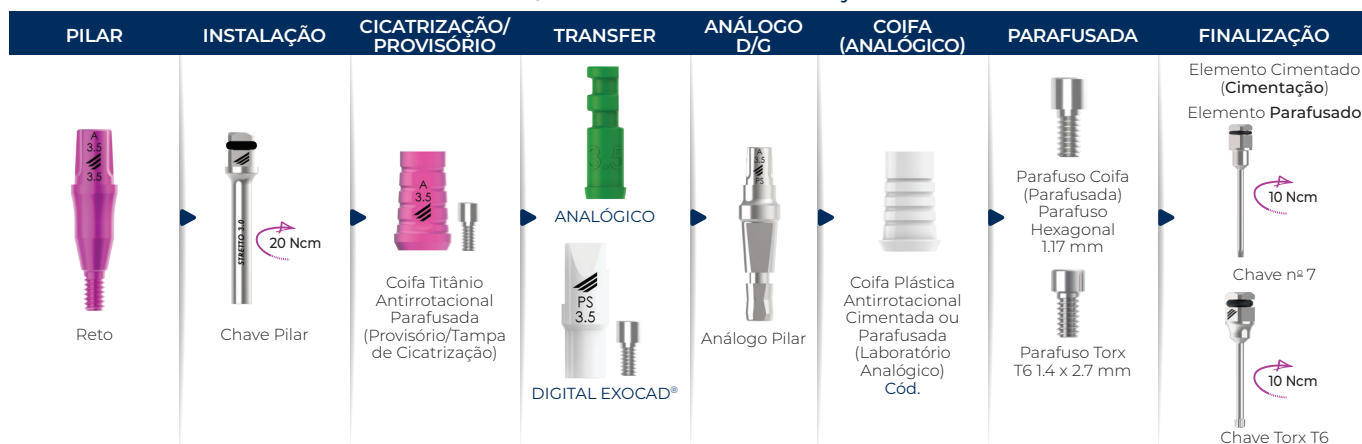

PILAR ANGULADO STRETTO

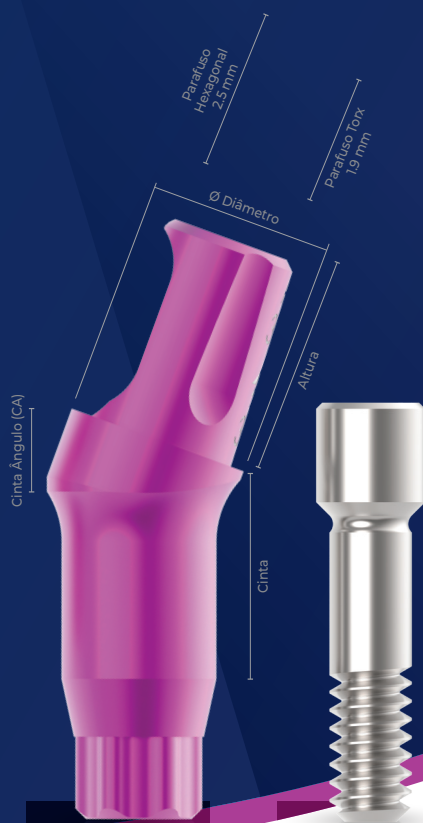

Diâmetro	x	Altura	x	Cinta	x	Cinta Ângulo (CA)
Cinta		3.0x3.5		3.0x4.8		CA 20°
1.5 mm		34538		33034		2.4 mm
2.5 mm		34539		33036		3.4 mm
3.5 mm		33540		33038		4.3 mm

Para implantes de 10 mm a 15 mm.

VANTAGENS

- » Indicado para casos unitários;
- » Indicado para próteses cimentadas ou parafusadas;
- » Diâmetro: 3.0;
- » Pilar Angulado, em duas peças (pilar indexado);
- » Angulado: cinta de 1.5, 2.5 e 3.5 mm;
- » Possui análogos, transferentes de moldagem (plástico), coifas de provisório parafusado (titânio) e fundição (plástica) correspondentes ao diâmetro e altura dos pilares;
- » Para utilização do Pilar Stretto como elemento parafusado, deverá observar a imagem, e conforme parafuso selecionado deverá acrescentar a altura correspondente ao planejamento; esse aumento é referente a utilização do parafuso para fixação da coroa;
- » Para melhor orientação utilize os componentes para seleção, aplique as Coifas de simulação Cimentada ou Parafusada, conforme altura do Pilar aplicado;
- » Coifas Plásticas não acompanham parafusos. Opções Hexagonais e Torx vendidas separadamente;
- » Coifa Titânio acompanha Parafuso Hexagonal 1.17 mm para Provisório Parafusado ou uso como Tampa de Cicatrização;
- » Instalação Pilar: utilizar a Chave Pilar Stretto. Ela poderá ser aplicada em pilares de altura 3.5 ou 4.8;
- » Instalação Coifa Parafusada (titânio ou plástica): chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm;
- » Torque de instalação Pilar: 20 Ncm;
- » Torque de instalação para Coifa quando Prótese Parafusada: 10 Ncm;
- » O Pilar conta com toda a linha digital.

Análogo D/G	Coifa Plástica C/P AR	Coifa Titânio P AR	Parafuso Coifa Hexagonal	Parafuso Coifa Torx	Túnel Check Prótese
34565	34347	34535	4763	30131	34584
34357	34348	34536			

Deverá selecionar os componentes conforme a altura do pilar aplicado.

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO

PILAR	INSTALAÇÃO	CICATRIZAÇÃO/PROVISÓRIO	TRANSFER	ANÁLOGO D/G	COIFA (ANALÓGICO)	PARAFUSADA	FINALIZAÇÃO
Angulado AR	Chave Hexagonal nº 7 – 1.17 mm Curta Cód. 20626 Média Cód. 18685 Longa Cód. 20619 20 Ncm	Coifa Titânio Antirrotacional Parafusada (Provisório/Tampa de Cicatrização)	ANALÓGICO DIGITAL EXOCAD®	Análogo Pilar	Coifa Plástica Antirrotacional Cimentada ou Parafusada (Laboratório Analógico)	Parafuso Coifa (Parafusada) Parafuso Hexagonal 1.17 mm Parafuso Torx T6 1.4 x 2.7 mm	Elemento Cimentado (Cimentação) Elemento Parafusado Chave nº 7 Chave Torx T6 10 Ncm

